



REVAS® VENOVENÖSE DUAL LUMEN KANÜLE


Die REVAS® VenoVenöse Dual Lumen Kanüle ist speziell für die gleichzeitige Drainierung und Rückführung von einem einzigen Ausgangspunkt für veno-venöse ECMO konzipiert.

Eingeführt über die V. Jugularis bis in die V. Cava Inferior. In V. Cava Inferior wird venöses Blut angesaugt und zur ECMO geführt.

Das O²-reiche Blut wird dann - über den arteriellen Schenkel der Kanüle - zurück ins Herz und in den Blutkreislauf geführt.

FEATURES

- Anwendungsdauer bis zu 30 Tage
- RHEOPAX® Beschichtung
- Drahtverstärkt
- Knickstabilität
- Hohe Flussrate
- DEHP-frei
- Optional REVAS® Einführbesteck für Dual Lumen Kanüle

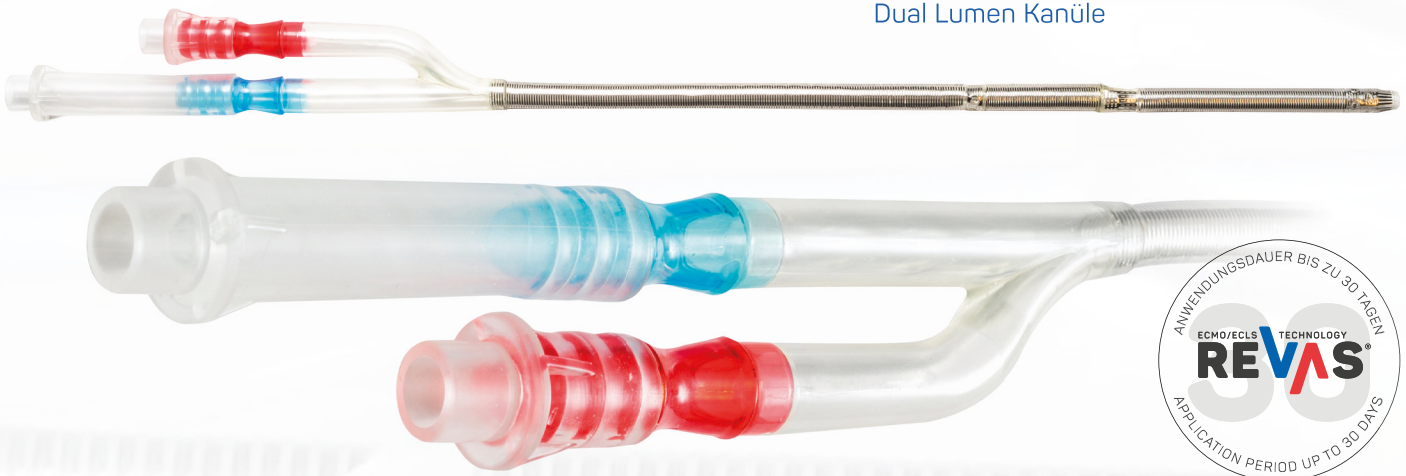

TECHNISCHE DATEN

FRENCH

19 23 27 31

KONNEKTOR

3/8"

ARTIKELNUMMER

FLK VV Fr*

FLK VV Fr* R (RHEOPAX®)

VE

1 Stück

LIEFERZEIT

nach Absprache

* bitte wählen Sie die gewünschte French-GöÙe.

